



INDICE

ESPAÑOL	2
PORTUGUES	12



MANUAL DE USUARIO

MODELO RAMBLA

1404SR & 1405SR



Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la silla de ruedas, así como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que contacte con su proveedor habitual.

COMPONENTES DE LA SILLA

1. Respaldo de nylon
2. Asiento de nylon
3. Sistema de frenos
4. Reposapiés, plataforma y cincha de sujeción
5. Ruedas delanteras
6. Ruedas trasera
7. Reposabrazos
8. Empuñaduras ergonómicas



MONTAJE DE LOS COMPONENTES

Reposapiés

Los reposapiés deben colocarse siempre hacia afuera, introduciendo los encajes superiores en la estructura de la silla. Una vez colocados, girar el reposapiés hacia el interior de la silla, hasta que el gatillo de extracción se cierre con un “click”. Para desmontar los reposapiés gire el gatillo, gire los reposapiés 90º hacia fuera y tire de ellos hacia arriba para sacarlos.



1. Encaje superior
2. Gatillo de extracción
3. Regulador longitud reposapiés

Mediante el tornillo regulador de la longitud del reposapiés puede ajustar la distancia de las plataformas para adecuarlas a la necesidad del usuario.



PRECAUCIÓN

Los reposapiés deben quedar separados del suelo por lo menos 65 mm para evitar posibles caídas.

Reposabrazos

Los reposabrazos son abatibles, basta con presionar el pasador situado en la parte delantera (ver imagen inferior) y tirar hacia arriba del reposabrazos entero.



PRECAUCIÓN

Nunca transporte la silla cogida por el reposabrazos, ya que puede dañarlos o dañar la estructura de la silla.

Compruebe siempre antes de usar la silla que los reposabrazos están debidamente colocados.

Frenos

El sistema de frenos de la silla es de “palanca”, es decir, hay que empujar el freno para que actúe inmovilizando la silla.

Los tornillos que unen los frenos a la estructura de la silla permite ajustarlos según sus necesidades.



PRECAUCIÓN

Bloquee los frenos cuando se siente o levante de la silla. Los frenos no están diseñados para reducir la velocidad de la silla, solo son para impedir el movimiento de las ruedas traseras cuando está parada.

Instrucciones de plegado y desplegado

Para abrir la silla de ruedas, deberá elevar las dos ruedas de uno de los dos lados de la silla, para que éstas no toquen el suelo. Empujar hacia afuera el reposabrazos del lado que tiene las ruedas elevadas del suelo. Para terminar de abrirla, puede ayudarse de las manetas posteriores, si fuera necesario. Una vez sentado, despliegue el reposapiés y baje las plataformas

Para cerrar la silla, suba las plataformas del reposapiés y pliegue los reposapiés hacia fuera. Coja la tela del asiento por el medio y tire de ella hacia arriba hasta que quede completamente cerrada.



PRECAUCIÓN

Una vez abierta la silla, es importante poner el freno de las ruedas, sobretodo antes de sentarse. Al incorporarse también es necesario poner el freno, para evitar que la silla se deslice y pueda causar algún daño al usuario.

CONSEJOS DE USO

1. Antes de usar la silla, es conveniente aprender las técnicas para levantarse, sentarse, realizar transferencias, subir y bajar rampas, escalones, etc. Puede ayudarse de este manual de instrucciones pero es recomendable solicitar información a un profesional sanitario.
2. No conduzca nunca la silla sólo sobre las ruedas traseras.
3. No es recomendable inclinarse hacia delante (para atarse los zapatos, coger algo del suelo,...), utilice aparatos especialmente diseñados para esta función. En caso de necesidad, mantenga la espalda apoyada en el respaldo, coloque las ruedas de delante rectas para alargar la base de la silla e inclínese poco a poco para no desequilibrar la silla.
4. Respete siempre el peso máximo soportado de la silla, y asegúrese que el tamaño de la silla se adecua al usuario.
5. No baje o suba escaleras sin ayuda, ni haga movimientos bruscos.
6. En la calle, circule siempre por aceras y arcenes, nunca por la carretera. Asegúrese que su presencia es visible para los conductores cuando cruce la calle. Siempre circule con precaución.
7. No corra riesgos innecesarios, no dude en solicitar la ayuda de otra persona para superar algún obstáculo.


Transferencias autónomas

Antes de realizar la transferencia, deberá extraer el reposabrazos (ver página 3) del extremo al que vaya a realizarse la transferencia.

Coloque la silla lo más cerca posible del lado en el que se vaya a realizar la transferencia, con las ruedas delanteras giradas hacia los lados, bloqueando el movimiento frontal de la silla.

Bloquee las ruedas para mayor seguridad y pliegue los reposapiés hacia fuera, o quítelos. Cambie el peso corporal al asiento/superficie donde vaya a transferirse.

Si tiene dificultades en la realización de transferencias, siempre recomendable usar una tabla de transferencia.

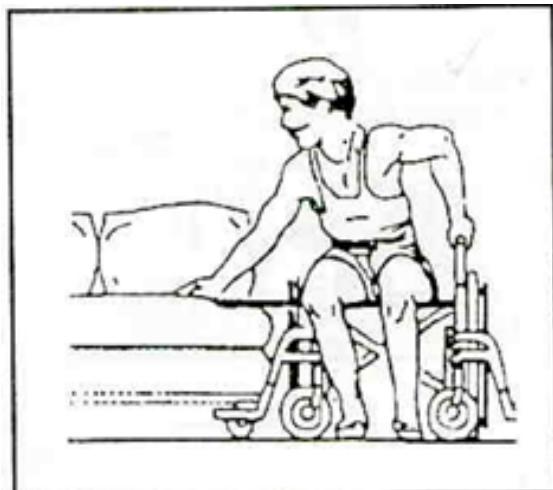

PRECAUCIÓN

Antes de realizar la transferencia a la silla o fuera de ella, es muy importante que la distancia entre los elementos sea la mínima posible. Es importante que las ruedas delanteras miren en la dirección dónde se encuentre el objeto en el que vaya a transferirse.

Cómo subir o bajar escaleras




PRECAUCIÓN

No utilice escaleras mecánicas para mover una silla de ruedas ocupada entre una o más plantas. Puede producir lesiones corporales graves.

Se aconseja extrema precaución cuando sea necesario mover una silla de ruedas para subir o bajar escaleras. Se recomienda ser ayudado por dos personas para poder hacer el movimiento.

Siga el siguiente procedimiento para subir las escaleras:

1. Inclinar la silla hasta el punto de equilibrio.
2. Colocar un ayudante en la parte frontal de la silla y otro en la parte trasera.
3. El ayudante que está en la parte trasera, deberá inclinar la silla hacia atrás y apoyarla al escalón, agarrando las empuñaduras para hacer fuerza.
4. El ayudante que está en la parte frontal de la silla, agarrando la silla por la parte frontal (por la estructura, nunca por ninguna parte desmontable), deberá levantar la parte frontal de la silla.

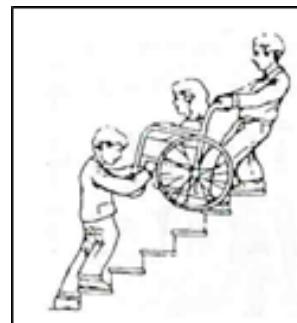

Inclinación del usuario en la silla

1. Inclinación hacia adelante

Cuando el usuario tenga la necesidad de doblarse o inclinarse hacia delante, es importante utilizar las ruedas delanteras como una herramienta para mantener la estabilidad y el equilibrio del usuario en la silla. Esta posición es esencial para su seguridad.

Para ello, será importante dirigir las ruedas delanteras para su movimiento hacia delante (en caso de ser necesaria una inclinación hacia esta dirección) y activar el bloqueo de las ruedas. Es importante no apoyarse en la parte delantera de los reposabrazos, pues desestabilizaría la silla.



PRECAUCIÓN

No intente alcanzar objetos en ninguno de los siguientes casos:

1. Si esto implica que usted tiene que avanzar en el asiento o
2. Si usted tiene que recogerlos del suelo


Ambos movimientos desestabilizarían el centro de gravedad de la silla y podría producirse un accidente.

2. Inclinación hacia atrás

Cuando el usuario tenga la necesidad de desplazarse hacia atrás, posicione la silla lo más cerca posible del objeto.

Encare las ruedas delanteras hacia delante, para conseguir que el largo de la silla sea el mayor posible

La extensión máxima a la que podrá llegar es la que le permita el largo de su propio brazo, nunca cambie su posición de sentado.

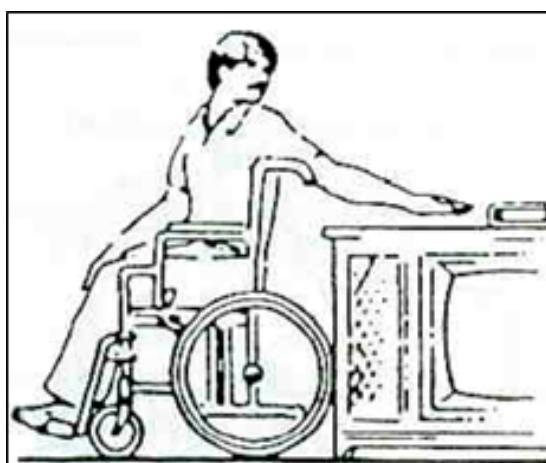

PRECAUCIÓN

No bloquee las ruedas en este caso, es mejor que éstas se deslicen hacia atrás en lugar de quedar bloqueadas y volcar. No se apoye sobre la parte superior del respaldo, esto cambiaría el centro de gravedad de la silla.

MANTENIMIENTO Y AJUSTES A REALIZAR POR EL USUARIO

1. Comprobar la presión de las ruedas: en caso de ruedas neumáticas, asegúrese que la presión sea la adecuada. Es recomendable realizar una revisión semanal y mantener los neumáticos siempre en la presión correcta.

Las ruedas macizas deberían cambiarse siempre que empiecen a aflojarse de los bordes, cuando aparecen grietas o se quedan sin relieve.



ADVERTENCIA

Cambie inmediatamente cualquier parte que esté agrietada o dañada, como neumáticos, reposabrazos, crucetas, asiento, respaldo, etc.

2. Ajuste de la longitud e inclinación del reposapiés normal (de serie): los ajustes deben realizarse individualmente y con el usuario sentado en la silla y apoyando los pies en las plataformas de los reposapiés. Para mover el reposapiés hacia arriba o hacia abajo, sírvase de una llave inglesa para aflojar el tornillo de la parte inferior del reposapiés, debajo de la plataforma. Una vez ajustado a la medida deseada, vuelva a apretar el tornillo para fijarla. Para ajustar el largo del reposapiés, recuerde que la distancia entre el suelo y la plataforma del reposapiés debe ser de al menos 6,5 centímetros.



ADVERTENCIA

Es importante asegurar que una vez ajustado el reposapiés, la altura e inclinación fijada no cause fricción entre la parte trasera de las piernas y la parte delantera de la tapicería del asiento. Es recomendable que la rodilla quede ligeramente por encima de la altura de la cadera.

3. Ajuste de la longitud e inclinación del reposapiés elevable: para elevar el reposapiés, levante el mismo hasta la posición deseada, al soltar el reposapiés se quedará fijado en su posición.

Para bajar el reposapiés, presione el estribo y manténgalo apretado hasta bajar el reposapiés. Dejar de presionar cuando encuentre la posición adecuada.



ADVERTENCIA

Bajar el reposapiés de forma lenta, nunca de golpe. Esto contribuirá a alargar la vida útil del producto.

4. Limpieza: La estructura de la silla se puede limpiar con un abrillantador que no sea agresivo. Para limpiar la tela del asiento y el respaldo, utilizar una esponja humedecida en agua tibia y ayúdese de un jabón suave. Se recomienda usar un limpiador específico para nylon.



ADVERTENCIA

Para limpiar las partes metálicas, no utilizar productos abrasivos ni detergentes fuertes, ni se ayude de materiales que puedan rallar la estructura.

5. Ruedas: Las ruedas deberían revisarse al menos una vez al mes para comprobar la tirantez hacia el eje de los radios. Si la rueda tambalea o está suelta, suelte la tuerca de seguridad y apriete el tornillo del eje ligeramente. Para comprobar que la rueda está correcta, apóyela sobre uno de los dos lados y haga girarla. Ésta debería dejar de girar de forma lenta. Si se para de forma abrupta, significa que está demasiado prieta y que el eje debería soltarse un poco.

Las ruedas delanteras están aseguradas por una horquilla, mediante una tuerca y un tornillo. Esta tuerca y tornillo deberían comprobarse periódicamente para permitir un giro cómodo pero seguro. Debajo de la tapa de la rueda hay una tuerca de ajuste. Si está demasiado prieta esta tuerca, será difícil de dirigir la silla, en cambio, si está demasiado floja, el movimiento no será firme y se balanceará la rueda.

Para comprobar que la rueda está correcta:

- Incline la silla hacia atrás
- Levante la rueda giratoria hacia el techo y luego empuje suavemente hacia abajo y a los lados. La rueda y la horquilla deberían girar sin obstáculos y frenar poco a poco.
- Si la rueda se detiene en ángulo hacia un lado, aflojar la tuerca de seguridad de la horquilla y ligeramente presiónela.

6. Crucetas: Asegúrese que la tuerca y el tornillo que sujetan las crucetas se aprietan de tal forma que permite el plegado fácil de la silla de ruedas pero no quedan sueltas.

Periódicamente lubricar el perno central. Esto asegurará a la silla de ruedas que se “flexiona” al cruzar superficies irregulares.




ADVERTENCIA

Periódicamente lubricar el tornillo central.

7. Bloqueo de las ruedas: Activar los frenos presionando las manetas hacia adelante. Para ajustar un freno, aflojar la tuerca de la palanca para quitarle o añadirle presión, según se necesite.

Deslice la palanca de freno hacia la rueda trasera hasta que se incruste en la misma y consiga su bloqueo. Si el freno se gasta o se daña, reemplazar todo el sistema de freno con urgencia.

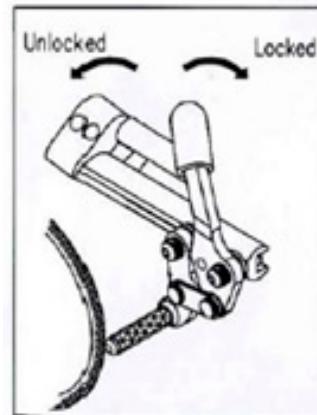

MODIFICACIONES DE LA SILLA

El uso de piezas no subministradas por TEYDER, S.L. o cualquier modificación realizada sobre la silla puede dañar la estructura de la misma y crear condiciones de inseguridad, nunca cubiertas en garantía.

Modelo	1404SR	1405SR
Ancho asiento	41 / 43 / 45 CM	41 / 43 / 45 CM
Altura total	90 CM	90 CM
Ancho total	59 / 61 / 63 CM	56 / 58 / 60 CM
Ancho plegado	29 CM	29 CM
Largo total	101 CM	101 CM
Fondo asiento	43 CM	43 CM
Altura asiento-suelo	49 CM	49 CM
Alto respaldo	43 CM	43 CM
Peso	18.5 KG	16KG
Peso máximo	125 KG	125 KG
Ruedas delanteras	200 MM MACIZAS	200 MM MACIZAS
Ruedas traseras	600 MM PU	315 MM PU

*El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.

GARANTIA

La estructura de las sillas de ruedas tiene garantía de tres años por defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste natural (neumáticos, asientos y respaldos, frenos,...) así como problemas ocasionados por el uso indebido.

Importado y distribuido por:

TEYDER, S.L.

Polígon Industrial Sant Antoni. Nau 5
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
teyder@teyder.com
www.teyder.com

Por problemas técnicos contactar con **sat@teyder.com**






**MANUAL DO
UTILIZADOR MODELO
RAMBLA 1404SR &
1405SR**



Leia atentamente estas instruções de utilização para dar um uso correto e seguro à cadeira de rodas, assim como proporcionar-lhe a manutenção adequada. Se tiver alguma dúvida, é importante que contacte o seu fornecedor habitual.

COMPONENTES DA CADEIRA

1. Encosto de nylon
2. Assento de nylon
3. Sistema de travões
4. Apoio de pés, plataforma e alça de fixação
5. Rodas dianteiras
6. Rodas traseiras
7. Apoios de braços
8. Punhos ergonómicos

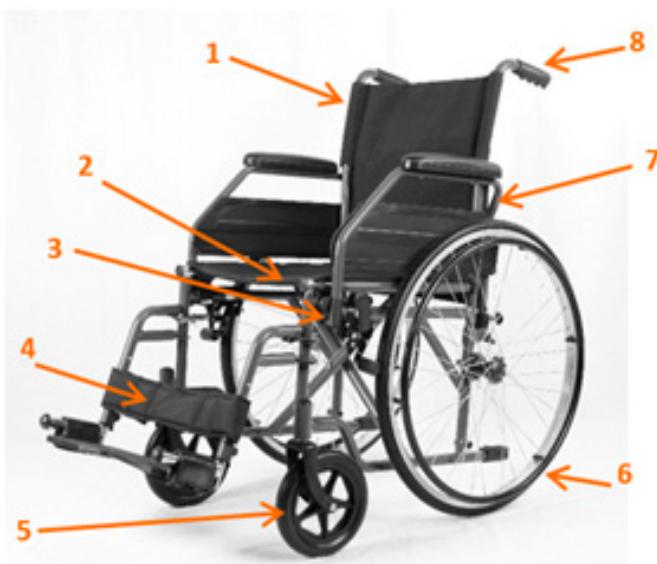

MONTAGEM DOS COMPONENTES

Apoios de pés

Os apoios de pés devem ser sempre colocados para fora, introduzindo os encaixes superiores na estrutura da cadeira. Depois de colocados, rodar o apoio de pés para o interior da cadeira, até que o gatilho de extração se feche com um “clique”. Para desmontar os apoios de pés rode o gatilho, rode os apoios de pés 90º para fora e puxe-os para cima para os retirar.



1. Encaixe superior
2. Gatilho de extração
3. Regulador comprimento apoio de pés

Mediante o parafuso regulador do comprimento do apoio de pés pode regular a distância das plataformas para adequá-las à necessidade do utilizador.



CUIDADO

Os apoios de pés devem ficar separados do chão pelo menos 65 mm para se evitarem eventuais quedas.

Apoios de braços

Os apoios de braços são rebatíveis; basta pressionar o perno situado na parte dianteira (veja a imagem abaixo) e puxar para cima o apoio de braços inteiro.



PRECAUCIÓN

Nunca transporte a cadeira agarrada pelos apoios de braços, dado que poderia danificá-los ou danificar a estrutura da cadeira. Antes de usar a cadeira, verifique sempre se os apoios de braços estão devidamente colocados.

Travões

O sistema de travões da cadeira é de “alavanca”, isto é necessário empurrar o travão para que atue, imobilizando a cadeira.

Os parafusos que unem os travões à estrutura da cadeira permitem a sua regulação de acordo com as suas necessidades.



CUIDADO

Bloqueie os travões quando se sentar na, ou levantar da cadeira. Os travões não foram concebidos para reduzirem a velocidade da cadeira; só servem para impedir o movimento das rodas traseiras quando está parada.

Instruções de dobragem e desdobramento

Para abrir a cadeira de rodas, deverá elevar as duas rodas de um dos dois lados da cadeira, para que estas não toquem no chão. Empurrar para fora os apoios de braços do lado que tem as rodas elevadas do chão. Para acabar de a abrir, pode recorrer à ajuda das alavancas posteriores, se for necessário. Depois de estar sentado, desdobre os apoios de pés e baixe as plataformas.

Para fechar a cadeira, suba para as plataformas dos apoios de pés e sobre os apoios de pés para fora. Pegue no tecido do assento a meio e puxe-o para cima até que fique totalmente fechado.



CUIDADO

Depois de aberta a cadeira, é importante que se aplique o travão das rodas, sobretudo antes de se sentar. Ao incorporar-se também é necessário aplicar o travão, para evitar que a cadeira deslize e possa provocar algum dano ao utilizador.

CONSELHOS DE USO


1. Antes de usar a cadeira, é conveniente que aprenda as técnicas para se levantar, sentar, efetuar transferências, subir e descer rampas, degraus, etc. Pode recorrer à ajuda deste manual de instruções, mas é recomendável que solicite informações a um profissional de saúde.
2. Nunca conduza a cadeira apenas sobre as rodas traseiras.
3. Não é recomendável que se incline para a frente (para atar os sapatos, apanhar algo do chão, etc.), utilize aparelhos especialmente concebidos para esta função. Se for necessário, mantenha as costas apoiadas no encosto, coloque as rodas da frente retas para alongar a base da cadeira e incline-se pouco a pouco para não desequilibrar a cadeira.
4. Respeite sempre o peso máximo suportado pela cadeira e certifique-se de que o tamanho da cadeira se adequa ao utilizador.
5. Não desça nem suba escadas sem ajuda, nem faça movimentos bruscos.
6. Na rua, circule sempre por passeios e bermas, nunca pela estrada. Certifique-se de que a sua presença é visível para os condutores quando cruza a rua. Circule sempre com cuidado.
7. Não corra riscos desnecessários, não hesite em solicitar a ajuda de outra pessoa para transpor algum obstáculo.

Transferências autónomas

Antes de efetuar a transferência, deverá extrair os apoios de braços (veja a página 3) da extremidade para a qual se vai efetuar a transferência. Coloque a cadeira o mais perto possível do lado em que se vai efetuar a transferência, com as rodas dianteiras rodadas para os lados, bloqueando o movimento frontal da cadeira.

Bloqueie as rodas para uma maior segurança e dobre os apoios de pés para fora, ou retire-os. Mude o peso corporal para o assento/superfície para onde se vai transferir.

Se tiver dificuldades na execução de transferências, é sempre recomendável que use uma tábua de transferência.

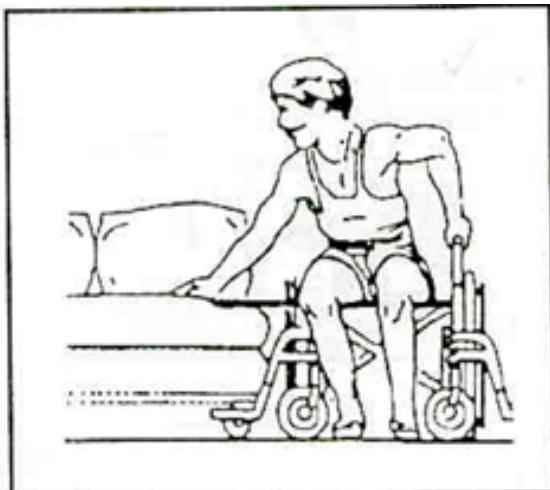

ADVERTÊNCIA

Antes de efetuar a transferência para a cadeira ou para fora dela, é muito importante que a distância entre os elementos seja a mínima possível. É importante que as rodas dianteiras estejam viradas para onde se encontrar o objeto para onde se vai transferir.

Como subir ou descer escadas




CUIDADO

Não utilize escadas mecânicas para mover uma cadeira de rodas ocupada entre um ou mais andares. Pode provocar lesões corporais graves.

Aconselha-se um cuidado extremo quando for necessário mover uma cadeira de rodas para subir ou descer escadas. Recomenda-se que seja ajudado por duas pessoas para poder efectuar o movimento.

Siga este procedimento para subir as escadas:

1. Inclinar a cadeira até ao ponto de equilíbrio.
2. Colocar um ajudante na parte frontal da cadeira e outro na parte traseira.
3. O ajudante que está na parte traseira deverá inclinar a cadeira para trás e apoiá-la no degrau, agarrando nos punhos para fazer força.
4. O ajudante que está na parte frontal da cadeira, pegando na cadeira pela parte frontal (pela estrutura, nunca por nenhuma parte desmontável), deverá levantar a parte frontal da cadeira.

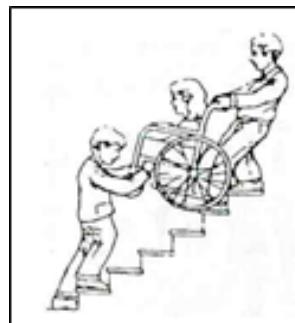

Inclinação do utilizador na cadeira

1. Inclinação para a frente

Quando o utilizador tiver necessidade de se dobrar ou inclinar para a frente, é importante que se utilizem as rodas dianteiras como ferramenta, para se manter a estabilidade e o equilíbrio do utilizador na cadeira. Esta posição é essencial para a sua segurança.

Para tal, será importante que se dirijam as rodas dianteiras para o seu movimento para a frente (caso seja necessária uma inclinação para esta direção) e que se ative o bloqueio das rodas. É importante que não se apoie na parte dianteira dos apoios de braços, pois desestabilizaria a cadeira.



ADVERTÊNCIA

Não tente alcançar objetos em nenhum dos casos seguintes:

1. Se isto implicar que tenha que avançar no assento ou
2. Se tiver que os apanhar do chão


Os dois movimentos desestabilizariam o centro de gravidade da cadeira e poderia ocorrer algum acidente.

2. Inclinação para trás

Quando o utilizador tiver necessidade de se deslocar para trás, posicione a cadeira o mais perto possível do objeto.

Vire as rodas dianteiras para a frente, para conseguir fazer com que o comprimento da cadeira seja o maior possível

A extensão máxima a que poderá chegar é a que lhe for permitida pelo comprimento do seu próprio braço; nunca altere a sua posição de sentado.

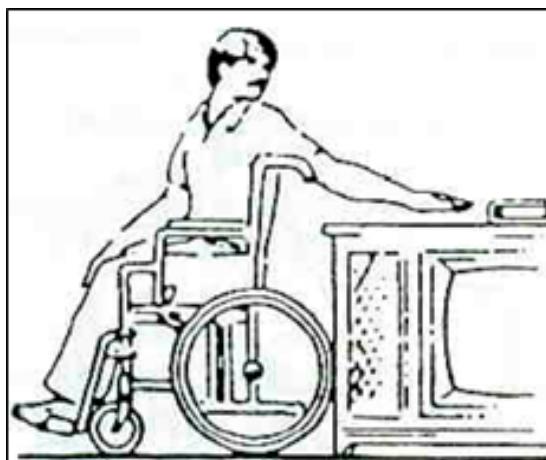

ADVERTÊNCIA

Não bloquee as rodas neste caso; é melhor que estas deslizem para trás em vez de ficarem bloqueadas e virar-se. Não se apoie sobre a parte superior do encosto; isto alteraria o centro de gravidade da cadeira.

MANUTENÇÃO E REGULAÇÕES A EFETUAR PELO UTILIZADOR

1. Verificar a pressão das rodas: no caso de rodas pneumáticas, certifique-se de que a pressão é a adequada. É recomendável que seja efetuada uma revisão semanal e que se mantenham sempre os pneus com a pressão correta.

As rodas maciças devem ser substituídas sempre que comecem a desapertar-se das bordas, quando aparecerem gretas ou se ficarem sem relevo.



ADVERTÊNCIA

Substitua imediatamente qualquer parte que esteja gretada ou danificada, como pneus, apoios de braços, cruzetas, assento, encosto, etc.

2. Regulação do comprimento e da inclinação do apoio de pés normal (de série): as regulações devem ser efetuadas individualmente e com o utilizador sentado na cadeira e apoiando os pés nas plataformas dos apoios de pés. Para mover o apoio de pés para cima ou para baixo, use uma chave inglesa para desapertar o parafuso da parte inferior dos apoios de pés, debaixo da plataforma. Depois de regulado para a medida desejada, volte a apertar o parafuso para a fixar. Para regular o comprimento do apoio de pés, lembre-se de que a distância entre o chão e a plataforma do apoio de pés deve ser de pelo menos 6,5 centímetros.



ADVERTÊNCIA

É importante que se garanta que, depois de regulado o apoio de pés, a altura e inclinação fixadas não causem fricção entre a parte traseira das pernas e a parte dianteira do estofo do assento. É recomendável que o joelho fique ligeiramente acima da altura da anca.

3. Regulação do comprimento e a inclinação do apoio de pés elevável: para elevar o apoio de pés, levante o mesmo até à posição desejada, ao soltar o apoio de pés, ficará fixado na sua posição.

Para baixar o apoio de pés, pressione o estribo e mantenha-o pressionado até que o apoio de pés desça. Deixar de pressionar quando encontrar a posição adequada.



ADVERTÊNCIA

Baixar lentamente o apoio de pés, nunca de repente. Isto contribuirá para prolongar a vida útil do produto.

4. Limpeza: A estrutura da cadeira pode ser limpa com um abrillantador que não seja agressivo. Para limpar o tecido do assento e do encosto, utilizar uma esponja humedecida em água morna e com a ajuda de um sabão suave. Recomenda-se que use um limpador específico para nylon.



ADVERTENCIA

Para limpar as partes metálicas, não utilizar produtos abrasivos nem detergentes fortes, nem recorrer à ajuda de materiais que possam ralar a estrutura.

5. Rodas: As rodas devem ser revistas pelo menos uma vez por mês, para se verificar a tensão para o eixo dos raios. Se a roda cambalear ou estiver solta, solte a porca de segurança e aperte ligeiramente o parafuso do eixo. Para verificar se a roda está correta, apoie-a sobre um dos dois lados e faça-a rodar. Esta deveria deixar de rodar de forma lenta. Caso pare de forma abrupta, isso significa que está demasiadamente apertada e que o eixo deveria ser desapertado ligeiramente.

As rodas dianteiras estão seguradas por uma forquilha, mediante uma porca e um parafuso. Esta porca e parafuso devem ser verificados periodicamente para permitirem uma rotação cómoda mas segura. Por debaixo da tampa da roda há uma porca de regulação. Se esta porca estiver demasiadamente apertada, será difícil dirigir a cadeira; em contrapartida, se estiver demasiado frouxa, o movimento não será firme e a roda oscilará.

Para verificar se a roda está correta:

- Incline a cadeira para trás
- Levante a roda giratória para o teto e depois empurre suavemente para baixo e para os lados. A roda e a forquilha deveriam rodar sem obstáculos e travar pouco a pouco.
- Se a roda parar em ângulo para um dos lados, desaperte a porca de segurança da forquilha e pressione-a ligeiramente.

6. Cruzetas

Certifique-se de que a porca e o parafuso que fixam as cruzetas são apertados de tal forma que permitam a dobragem fácil da cadeira de rodas, mas não ficam soltos.

Lubrificar periodicamente o perno central. Isto garantirá que a cadeira de rodas se “flexiona” ao cruzar superfícies irregulares.




ADVERTENCIA

Lubrificar periodicamente o parafuso central.

7. Bloqueio das rodas: Ativar os travões pressionando os manípulos para a frente. Para regular um travão, desapertar a porca da alavanca para o retirar ou adicionar-lhe pressão, conforme for necessário.

Faça deslizar a alavanca de travão na direção da roda traseira até que se incruste na mesma e consiga o seu bloqueio. Se o travão se gastar ou se danificar, substituir todo o sistema de travão com

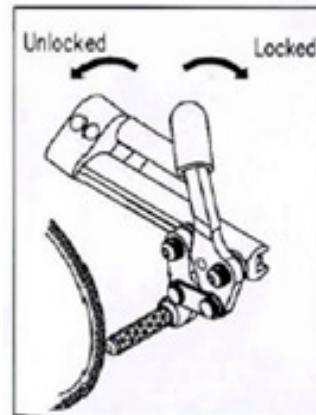

MODIFICAÇÕES DA CADEIRA

O uso de peças não fornecidas pela TEYDER, S.L. ou qualquer modificação efetuada na cadeira podem danificar a estrutura da mesma e criar condições de insegurança, nunca cobertas pela garantia.

Modelo	1404SR	1405SR
Largura assento	41/ 43/ 45 CM	41/ 43/ 45 CM
Altura total	90 CM	90 CM
Largura total	59/ 61/ 63 CM	56/ 58/ 60 CM
Largura dobrado	29 CM	29 CM
Comprimento total	101 CM	101 CM
Fundo assento	43 CM	43 CM
Altura assento-chão	49 CM	49 CM
Altura encosto	43 CM	43 CM
Peso	18,5 KG	16KG
Peso máximo	125 KG	125 KG
Rodas dianteiras	200 MM MACIÇAS	200 MM MACIÇAS
Rodas traseiras	600 MM PU	315 MM PU

*O fabricante reserva-se o direito de modificar as características sem aviso prévio.

GARANTIA

A estrutura das cadeiras de rodas tem garantia de três anos por defeitos de fabrico. A garantia não cobre o desgaste natural (pneus, assentos e encostos, travões, etc.,) assim como problemas ocasionados pelo uso indevido.

Importado e distribuído por:

TEYDER, S.L.

Polígon Industrial Sant Antoni. Nau 5
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
teyder@teyder.com
www.teyder.com

Em caso de problemas técnicos contactar con **sat@teyder.com**



