



ficha técnica

**Diseño
avanzado
Ultra
compacta**

1495SE

TRON

Nueva silla eléctrica
reclinable y
basculante manual

La TRON es una silla eléctrica ultracompacta para interior y exterior, con respaldo reclinable y asiento basculante. Sus medidas son ajustables y altamente adaptables.

Sus dimensiones compactas —ancho de solo 58 cm—, **permiten a la silla TRON pasar a través de puertas y maniobrar en lugares estrechos.** Las ruedas diseñadas para un mejor agarre en todo tipo de terreno y la suspensión trasera aporta mejor experiencia el terreno irregular (pendiente superable 10° y obstáculos 5 cm). **Las baterías de gran capacidad (2X 52Ah) para un máximo rendimiento (autonomía de 35/40 km).**

Homologada para transporte seguro.

**Motor
DYNAMIC**

2x 340W
con escobillas


35~40 km
52Ah x2
24V
GEL


106,5 kg
con baterías


136 kg


Acero


Respaldo plegable


Negro/Azul



sillas de ruedas eléctricas



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas





ficha técnica

1495SE
TRON



Tron manual
Diseño avanzado.
Ultra compacta de
gran rendimiento.

Incluye de serie:

- Reposacabezas
- Almohadillas de los reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- El VAS (Asiento Ajustable Variable), puede ajustarse con precisión
- Cojín anatómico con funda
- Respaldo anatómico
- Disponible reposapiés elevables y kit de luces opcionales
- Electrónica LINX y Motores Dynamic



Medidas respecto
al asiento



Medidas respecto
al suelo



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales




grúas



especificaciones técnicas

Ancho del asiento	39-49 cm.
Ancho del respaldo	39-49 cm.
Ancho total	58 cm.
Profundidad asiento	43-49 cm.
Ancho útil para sentarse (talla regulable)	43 - 54 cm
Profundidad sin reposapiés	82cm
Altura obstáculo	5 cm
Profundidad con reposapiés	108 cm
Alto respaldo a empuñadura	54 cm
Alto total	90 cm.
Alto del asiento al suelo	48 cm.
Dimensiones plegado	85*58*97 cm.

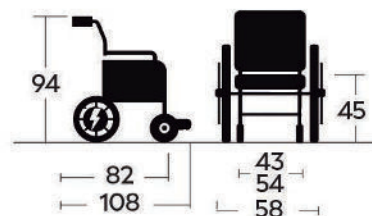

Cargador	AC 100-240 V
Ruedas delanteras	23x7,5 cm. macizas
Ruedas traseras	35,5x7,5 cm.
Reposabrazos	Abatibles y regulables
Reposapiés	Individuales
Pendiente superable	10°
Radio de giro	90 cm.
Velocidad	10 Km/h

