



ficha técnica

1496SE

TRON PLUS

Medidas
ajustables
Altamente
adaptable

Silla eléctrica con respaldo reclinable y basculación eléctrica



La TRON es una silla eléctrica ultracompacta para interior y exterior, con respaldo reclinable y asiento basculante para posicionamiento. Sus medidas son ajustables y altamente adaptables. Sus dimensiones compactas –ancho de solo 58 cm–, permiten a la silla TRON pasar a través de puertas y maniobrar en lugares estrechos. Las ruedas diseñadas para un mejor agarre en todo tipo de terreno y la suspensión trasera aporta mejor experiencia el terreno irregular (pendiente superable 10° y obstáculos 5 cm). Las baterías de gran capacidad (2X 52Ah) para un máximo rendimiento (autonomía de 35/40 km).

**Motor
DYNAMIC**

2x 340W
con escobillas

35~40
km

52Ah x2
24V

106,5
kg
con baterías

136
kg

Acero

**Respaldo
plegable**

Negro/Azul



sillas de
ruedas
eléctricas



scooters



motores



sillas de
ruedas
manuales



grúas





ficha técnica

1496SE

TRON PLUS

Silla eléctrica con respaldo reclinable y basculación eléctrica

Incluye de serie:

- Luces
- Reposacabezas
- Almohadillas reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- VAS (Asiento Ajustable Variable), ajustable con precisión
- Cojín de asiento con una funda
- Respaldo anatómico
- Reposapiés elevables



Medidas respecto
al asiento



Medidas respecto
al suelo

Tron electrónico



sillas de ruedas eléctricas



scooters



motores



sillas de ruedas manuales



grúas



Luces



Joystick




Basculación eléctrica



Eje delantero pivotante

especificaciones técnicas

Ancho del asiento	39-49 cm.
Ancho del respaldo	39-49 cm.
Ancho total	58 cm.
Profundidad asiento	43-49 cm.
Ancho útil para sentarse (talla regulable)	43 - 54 cm
Profundidad sin reposapiés	82cm
Altura obstáculo	5 cm
Profundidad con reposapiés	45-57,5 cm
Alto respaldo a empuñadura	54 cm
Alto total	90 cm.
Alto del asiento al suelo	48 cm.
Dimensiones plegado	85*60*97 cm.

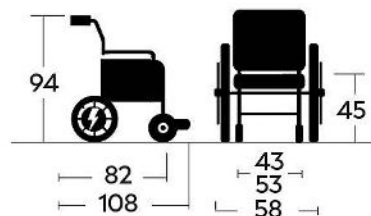

Cargador	AC 100-240 V
Ruedas delanteras	20/23 cm. macizas
Ruedas traseras	32,75/35,5 cm.
Reposabrazos	Abatibles y regulables
Reposapiés	Individuales
Pendiente superable	10°
Radio de giro	90 cm.
Velocidad	10 Km/h

